

IMMULITE 1000

Sistema de Inmunoensayos

Pantalla Touch Screen y software en plataforma Windows 2000 de fácil navegación.

Diluciones a bordo para pruebas específicas.

Dos modos de funcionamiento, estándar y turbo permiten flexibilidad en tiempo de resultados para pruebas de urgencias.

Especificaciones técnicas

Tecnología

- Quimioluminiscencia enzimática amplificada que permite el desarrollo de pruebas de tercera generación.
- Tecnología patentada de lavado por centrifugación vertical que permite la remoción efectiva de sustancias inespecíficas generando resultados de excelente calidad.

Fácil de usar


- Sistema de acceso continuo.
- Start Up en sólo 5 minutos.
- Carga continua de muestras y unidades de test.
- Mínimo mantenimiento.
- Fácil acceso a los componentes del sistema.

Productividad

- Consolida pruebas de rutina, esotéricas y urgencias.
- Velocidad hasta 120 pruebas/hora.
- Diluciones automáticas para pruebas específicas.

El más amplio portafolio de pruebas

- Más de 80 analitos disponibles.
- Continuo desarrollo de pruebas enfocados en la enfermedad.

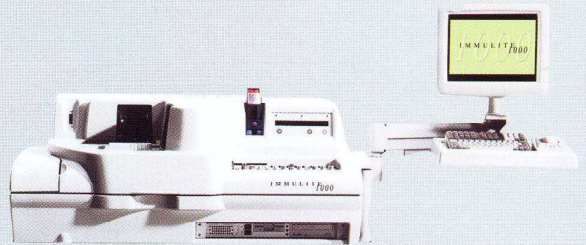

IMMULITE® 1000

Siemens Healthcare Diagnostics

SIEMENS

Pruebas STAT

- Modo turbo para obtener resultados en menos de 15 minutos.
- Disponibilidad modo turbo para pruebas Troponina I; NT-proBNP; Mioglobina; CKMB; PTH y HcG.

Software intuitivo

- Software en plataforma Windows® 2000.
- Interfaz a LIS con capacidad host-query.
- Diagnóstico remoto.
- Generación automática de gráficas Levey-Jennings.



Amplio menú que incluye pruebas para las siguientes categorías

- Adrenal/Pituitaria
- Alergia
- Anemia
- Metabolismo oseo
- Cardiovascular
- Diabetes
- Marcadores de crecimiento
- Infecciosas
- Marcadores de inflamación
- Fertilidad
- TDM Drogas terapéuticas
- Marcadores de función tiroidea
- Marcadores tumorales
- Pruebas modo turbo
- Veterinaria

Especificaciones del sistema

Temperatura de operación

18 - 32°C

Luminómetro

Tubo fotomultiplicador

Computador

Procesador integrado Intel® Pentium® II
256 MB RAM
Disco duro, 40 GB
CD-ROM drive
Floppy disk drive, 3.5 - inch
Tarjeta de sonido

Interfase de usuario

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000
Monitor plano 15 pulgadas con touch screen
(1024 x 768 resolución, 0.28 mm dot pitch)
Trackball
Microteclado

Impresora

Impresora ink-jet externa o impresora laser

Interfaz

LIS in conformance with ASTM E1394 y ASTM E 1381
Networks via EtherNet (10/100 BaseT)
Modem, V34-56K
Puerto USB 2.0

Requerimientos eléctricos

110 - 120 VAC, 6 Amp
200 - 230 VAC, 4 Amp
Línea dedicada, 50/60 Hz

Dimensiones (con monitor)

Ancho	46 in.	117 cm.
Alto	19 in.	48 cm.
Profundidad	26 in.	66 cm.
Peso	240 lb.	109 kg.

Certificaciones

ISO 13485: 2003
CE
UL/CUL
IEC
Especificaciones detalladas disponibles por solicitud

IMMULITE® y todas Las marcas son marcas registradas de Siemens Healthcare Diagnostics.

Siemens Healthcare Diagnostics
Carrera 65 No 11- 40
BOGOTÁ – COLOMBIA
Teléfono a nivel nacional 018000912301
o en Bogotá 4253124

Siemens Healthcare Diagnostics
Avenida Domingo Orué 971 Surquillo
Lima 100
LIMA – PERÚ
Tel. 51.1.2150030

Siemens Healthcare Diagnostics
Avenida Don Diego Cisneros
Edificio Siemens Urb. Los Ruices
Caracas, 1071
CARACAS – VENEZUELA
Tel. 58.212.203 8853